

**Biomédica
Peninsular**

MÁQUINA DE ANESTESIA

ROYAL MEDITECH RAM-100 II



CARACTERÍSTICAS

- Pantalla TFT de 7 "
- Medidor de flujo de alta precisión.
- Monitor con interfaz multiparamétrico.
- Diferentes configuraciones de trabajo.
- Alarma audiovisual.
- Diseño de circuito de respiración integrado.

ESPECIFICACIONES

La pantalla TFT LCD de 7 pulgadas despliega los parámetros de ventilación, información de alarma y oscilograma. El medidor de flujo de alta precisión indica instantáneamente el paso del gas al paciente.

El diseño del circuito integrado de respiración, asegura un funcionamiento seguro y ordenado.

Los múltiples modos de trabajo, como el control de volúmen y el límite de presión le permiten adaptarse a diferentes pacientes. El vaporizador con temperatura, presión, compensación de flujo y la función de auto sellado lo hace seguro en cualquier momento.

El tiempo de presión, tiempo de flujo y oscilograma se muestran en tiempo real.

El interruptor ACGO y el suministro rápido de oxígeno - uso de emergencia y reactivación después de la operación. El monitor de signos vitales y el monitor de gas anestésico son opcionales

SEGURIDAD


- Tres niveles de sistema de alarma, información de alarma visual y sonora.
- Con múltiples tipos de alarma, funciones de recordatorio y protección.
- Tecnología avanzada de control de administración de energía.
- Alarma de baja presión de oxígeno y protección de corte de N2O.

MODO DE VENTILACIÓN

- IPPV, A/C, SIMV, SIGH, MANUAL.

RANGO DE PARÁMETROS DE VENTILADOR

- **Flujometro:** O2 (0.1~ 10 L/min) / N2O (0.1 ~ 10 L/min).
- **Suministro rápido de oxígeno:** 25 L/min ~ 75L/min
- **Volumen tidal (Vt):**0.20 mL ~ 1,500 mL.
- **Frecuencia:**1/min ~ 100/min.
- **IE:** 2:1 ~ 1:6.
- **PEEP:** 0 cmH20 ~ 30 cmH20
- **Sensibilidad de activación por presión (Ftr):**-20 cmH20 ~ 0 cmH20.
- **Sensibilidad del disperador de flujo (Ftr):** 0.5 L/min ~ 30L/min.
- **SIGH:** 0 (off) 1/100 ~ 5/100.
- **Ventilación en apnea:** OFF,5s ~60s.
- **Límite de presión:**20 cmH20 ~ 100 cmH20.

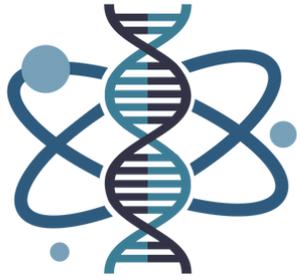

Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

☎ 9993610487

☎ 2211527690

✉ ventas.biomedicapeninsular@gmail.com

📘 Biomédica peninsular

📷 [biomedicapeninsular](#)

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.