




Biomédica
Peninsular

MONITOR DE SIGNOS VITALES

PHILIPS INTELLIVUE MP70

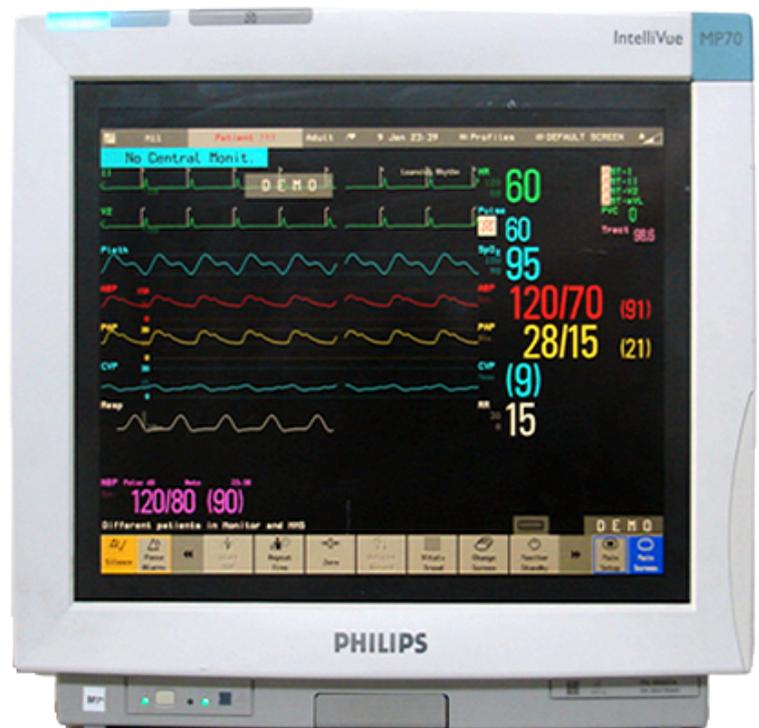

El Monitor Signos Vitales Philips MP70 integra una pantalla LCD a color de 15 pulgadas con una unidad de procesamiento de datos en un solo dispositivo.

El servidor de módulo flexible le permite utilizar hasta ocho módulos de medida cuando está conectado al Philips IntelliVue MP70.

Los módulos que se pueden adjuntar al FMS son presión sanguínea invasiva, temperatura, oxígeno sábedo de sangre arterial (SpO₂), salida cardíaca, gas transcutáneo, saturación de oxígeno venoso mixto (SvO₂), registrador, interfaz de dispositivo VueLink, EEG, índice biespectral (bis) y espirometía.

Este se puede enchufar y desenchufar todos estos módulos durante la supervisión, apenas Inserte el módulo hasta que la palanca en el módulo chasca.

CARACTERÍSTICAS

- Identificación automática de agentes anestésicos: Halotano, Isoflurano, Enflurano, Sevoflurano y Desflurano.
- Pantalla táctil y operación SpeedPoint.
- Alerta automática cuando se detecta mezcla de agente anestésico.
- Opciones de visualización personalizables con 10 configuraciones de pantalla predefinidas.
- Monitoreo ininterrumpido de pacientes.
- Valores de inspiración y caducidad para todos los gases.
- Tiempo de calentamiento rápido.
- Bajo caudal de muestra.
- Límites de alarma individuales para cada parámetro.
- Calibración automática de cero.
- Frecuencia respiratoria derivada de la forma de onda de CO₂.
- Trampa de agua desechable y reutilizable.
- Brillante y fácil leer la exhibición de color.
- Inicio rápido



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

 9993610487

 2211527690

 contacto@biomedicapeninsular.com

 Biomédica peninsular

 [biomedicapeninsular](https://www.instagram.com/biomedicapeninsular)

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.